

Détection et alertes de chute

Configuration Inspire X

Activer Alerte auto

Alerte de chute auto est disponible sous Outils patient dans la barre de navigation de gauche. Alerte de chute auto est « activée » par défaut.

Ajuster la sensibilité de détection des chutes

Ajustez la sensibilité de détection des chutes le cas échéant. Choisissez faible, par défaut ou forte. En augmentant la sensibilité, vous augmentez les chances de détection d'une chute. En diminuant la sensibilité, vous réduisez le risque de fausses alertes.

Évaluation du risque de chute

Les questions d'évaluation du risque de chute sont proposées pour faciliter la discussion entre le patient et l'audioprothésiste. Ces questions n'ont pas d'incidence sur le réglage de la sensibilité ni l'activation ou la désactivation de la fonction. « Alerte de chute auto recommandée » apparaît s'il a été répondu une fois « Oui » à l'une des questions d'évaluation du risque. « Alerte de chute auto en option » apparaît s'il a été répondu « Non » à toutes les questions d'évaluation du risque.

The screenshot displays the 'Auto Fall Alert' configuration screen in the Inspire X software. The interface is divided into several sections:


- Navigation Menu (Left):** Includes 'Latest News', 'Pre-Fitting', 'Get Started', 'Fitting' (with sub-items like QuickFit, Fine Tuning, User Controls, Experience Manager, Feedback Celler), 'Patient Tools' (with sub-items like Frequency Lowering, Sound Manager, Tinnitus, Memories, Accessories, Indicators, Fitting Summary, Data Log, Ready, Set, Hear, How Did We Do?), and 'Advanced Tools'.
- Top Bar:** Features 'Right Binaural Left' controls.
- Main Content Area:**
 - Self Check:** A plus sign icon.
 - Remote Programming:** A plus sign icon.
 - Auto Fall Alert:** A minus sign icon.
 - Auto Fall Alert:** A section with a red dot, a blue dot, and two checked checkboxes.
 - Fall Detection Sensitivity:** A section with a red dot, a blue dot, and three buttons: 'Low', 'Default', and 'High'. An information icon is next to 'Default'.
 - Fall Risk Screening:** A section with a red dot, a blue dot, and three questions with 'Yes' and 'No' checkboxes:
 - 'Have you fallen in the past year?' (Yes: , No:)
 - 'Do you feel unsteady when standing or walking?' (Yes: , No:)
 - 'Do you worry about falling?' (Yes: , No:)

Activer Alerte manuelle

Activez la fonction d'alerte manuelle sur l'écran Contrôles utilisateur en déplaçant Alerte Manuelle sur la fonction tactile Pression longue.

Alerte manuelle ne peut être associée qu'à la fonction tactile Pression longue.

L'icône d'information indique qu'une configuration supplémentaire est requise dans l'application Thrive Hearing Control pour que le système soit actif.

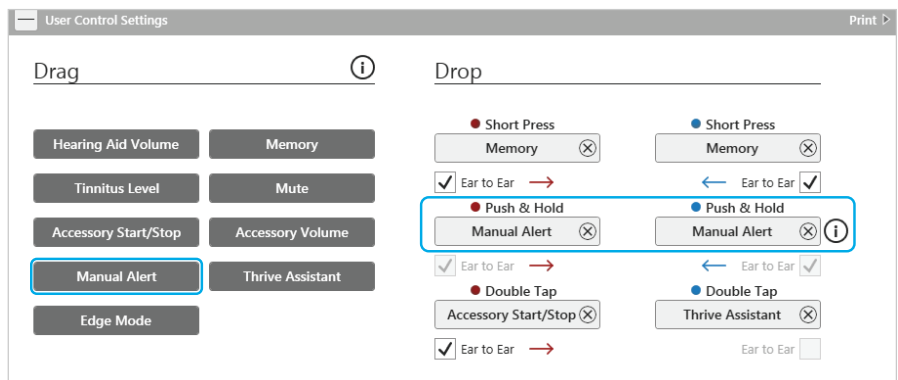

Lorsqu'une chute est automatiquement détectée ou une alerte manuelle déclenchée, les fonctionnalités des contrôles utilisateur hormis l'annulation de l'alerte ne sont pas actives.

Signaux sonores

Quatre signaux sonores d'alerte

Envoi de l'alerte

Lorsque le message d'alerte est envoyé au(x) contact(s), l'utilisateur entend « Alerte envoyée » dans ses aides auditives.

Alerte reçue

Lorsqu'un contact confirme la réception du message d'alerte, l'utilisateur entend « Alerte reçue » dans ses aides auditives.

Alerte annulée


Lorsqu'une alerte est annulée, l'utilisateur entend « Alerte annulée » dans ses aides auditives.

Échec de la communication

En cas d'échec de la communication lors de l'envoi d'un message d'alerte, un signal sonore retentit dans les aides auditives.

Pour limiter les échecs de communication, assurez-vous que :

- 1 Le smartphone est allumé et connecté à Internet (via réseau mobile ou WiFi).
- 2 Les aides auditives sont allumées, jumelées au Bluetooth® et connectées au smartphone.
- 3 L'application Thrive fonctionne au premier plan ou en arrière-plan.

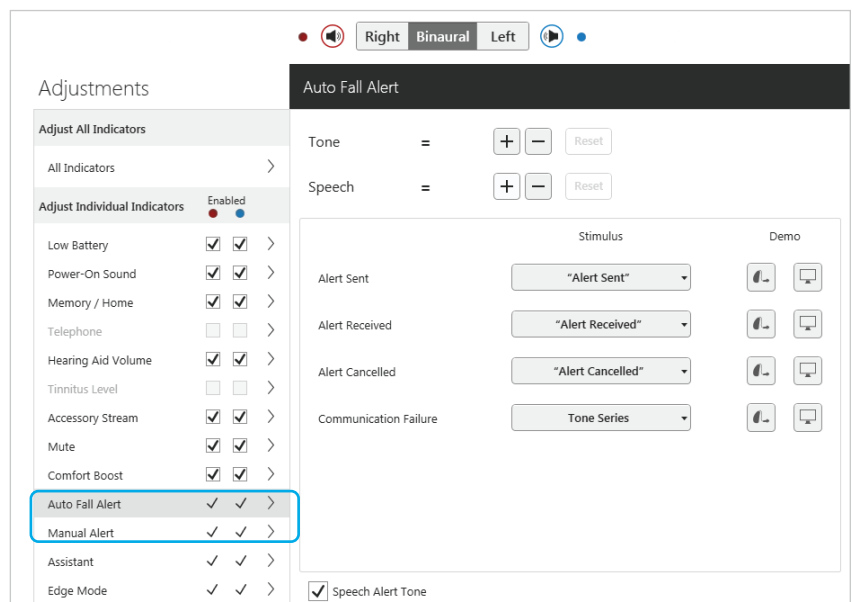

- Les signaux sonores d'Alerte de chute auto et d'Alerte manuelle sont liés. Une augmentation/diminution du niveau de l'un entraîne le même changement pour l'autre.
- Les signaux sonores d'alerte ne peuvent pas être désactivés.
- Les signaux sonores d'alerte ne sont disponibles dans les aides auditives que lorsque qu'un système est actif.

[Consulter le QuickTIP Configuration système Détection et Alertes de chute pour en savoir plus.](#)

Data Logging

La synthèse de l'écran Data Logging affiche une coche si au moins une chute a été détectée et/ou une alerte manuelle déclenchée.

Chaque bouton 'Reset' permet de réinitialiser l'option sans effacer tout le Data Logging.



Guide de l'appareil

Le Guide de l'appareil indique que les aides auditives possèdent la fonction Alerte de chute et contient des informations sur Alerte manuelle si celle-ci est activée.

Device Guide

Customized for: Cassie Falls Session 5/2/2021

Left: AI 2400 RIC 312 **Right:** AI 2400 RIC 312

Thrive Hearing Control

Vos appareils auditifs peuvent être ajustés à l'aide de l'application mobile Thrive Hearing Control. Pour obtenir des instructions sur l'application Thrive Hearing Control, consultez le manuel d'utilisation de vos aides auditives. L'application Thrive Hearing Control est disponible sur l'App Store ou sur Google Play.

➔ Your device features Automatic Alert. For additional information, refer to Fall Alert in the Thrive Hearing Control app or discuss with your hearing care professional.

Controls

Accessory Stream

To start or stop the accessory stream, firmly double tap directly on the top portion of either ear with either an open palm or two fingers. Your ear should push against your hearing aid with each double tap.

Memory

Press and release the upper or lower portion of the switch on either device to change the memory.

Memory	Environment	Indicator	Thrive/iOS
1	*Normal	Normal	Normal
2	Restaurant	Restaurant	Restaurant
3	Car	Car	Car
4	Disabled	Disabled	Disabled
🔊	Stream Boost: On	Tone Series	Stream Boost
Custom	Custom memory	Tone Series	Custom

Manual Alert

Press and hold the upper or lower portion of the switch on either device to trigger a manual alert.

Event	Indicator
Alert Sent	Alert Sent
Alert Received	Alert Received
Alert Cancelled	Alert Cancelled
Communication Failure	Tone Series

Les notifications de la fonction Alerte de chute ne sauraient se substituer à des services d'urgence et ne contactent aucunement les services d'urgence

Les notifications de la fonction Alerte de chute sont simplement un outil susceptible d'aider à transmettre certaines informations à des contacts tiers que l'utilisateur a préalablement identifiés. L'application Thrive n'est pas en communication avec les services d'urgence, n'apporte en aucune façon une assistance d'urgence et ne saurait être considérée comme remplaçant un appel à des services d'urgence professionnels. Le fonctionnement des fonctions de détection de chute de l'application Thrive dépend de la connectivité sans fil aussi bien pour l'utilisateur que pour le(s) contact(s) désigné(s) de l'utilisateur et ne peut transmettre de message si la connectivité Bluetooth ou cellulaire est perdue ou interrompue à un moment donné. La connectivité peut être perdue pour diverses raisons, notamment : le dispositif mobile jumelé est hors de portée des aides auditives ou perd autrement sa connectivité avec les aides auditives ; les aides auditives ou le dispositif mobile ne sont pas allumés ou n'ont pas assez de puissance ; le dispositif mobile est en mode avion ; le dispositif mobile tombe en panne ; ou le mauvais temps interrompt la connectivité du réseau du dispositif mobile.

La fonction Alerte de chute est un produit de bien-être général (non réglementé comme un dispositif médical)

La fonction Alerte de chute est conçue et distribuée comme un produit de bien-être général. La fonction Alerte de chute n'est aucunement conçue pour ni destinée à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir une maladie spécifique ou un problème médical particulier et ne s'adresse aucunement à une population spécifique ou particulière. Au contraire, la fonction Alerte de chute est uniquement conçue pour détecter la chute éventuelle d'un utilisateur et essayer d'envoyer un message en réponse à cet événement, en soutien à l'état de santé général de l'utilisateur.

Des informations complémentaires sont disponibles dans le guide d'utilisation des aides auditives et le contrat de licence d'utilisation de Thrive, disponible dans l'application Thrive et qui doit être lu et accepté avant que ne soit utilisée l'application Thrive.